



Oral Fluid Drug Test

The Fast, Reliable Drug Test Collection Just Swab, Snap & Seal

Preparation for Collection

- Positively identify the donor to be tested.
- Explain the test procedure to the donor. Provide donor instructions if desired.
- Confirm that the donor has not had anything in his or her mouth for 10 minutes prior to providing the oral fluid sample. If the donor has had anything in his/her mouth within the last 10 minutes, wait 10 minutes prior to beginning the collection process.


The Collection Process

- Inspect the expiration date on the Intercept® Oral Fluid Collection Device packaging and open the outer packaging containing the collection pad and the Oral Specimen Vial.
- Place the specimen vial on a flat surface in view of the donor. Instruct the donor to remove the collection device from the packaging sleeve.
- Instruct the donor to place the collection pad between the lower cheek and gums and gently rub the pad back and forth along the gum line until the pad is moist. **Once moist, leave collection pad between cheek and gums for 5 minutes.**
- After 5 minutes, have the donor open the specimen vial in an upright position, with the tip pointed downward, by gently rocking the cap back and forth to avoid spilling the contents.
- Instruct the donor to push the collection pad into the specimen vial as far as it will go.
- Instruct the donor to snap the collection wand at the scored line against the side of the vial. **Instruct the donor to not tilt the vial or spill the fluid inside.**


Completing the Process

- Instruct the donor to place the cap onto the vial until it snaps, ensuring a secure fit.
- Instruct donor to place tamper evident seal across the top of the specimen vial and down the sides, date and initial.
- Place the Intercept® specimen vial(s) and any required chain of custody form into the specimen bag.
- Place the specimen bag into the overnight shipping package and send the specimen to the laboratory for testing.

Swab

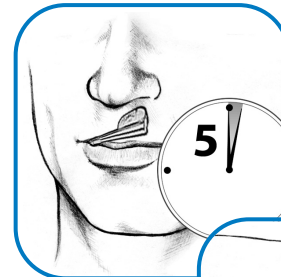

Snap

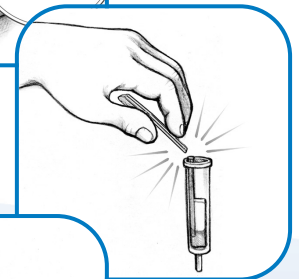

Seal



The Value of a Reliable and Trusted Brand



OraSure Technologies

OraSure Technologies, Inc. • 220 East First Street • Bethlehem, PA 18015 • Toll Free 800.ORASURE

Intercept® is a registered trademark of OraSure Technologies, Inc.

www.OraSure.com

INT0142 (rev. 09/10)



Oral Fluid Drug Test

La Colección Confiable Rápida de la Prueba de Droga Solamente Esponjar, Rompe y Sella

Preparativos para la Obtención de la Muestra

- Identifique positivamente al donante a quien se le hará la prueba.
- Explíquelo el procedimiento de prueba al donante. Si lo desea, entréguele las instrucciones para el donante.
- Confirme que el donante no haya tenido nada en la boca durante los 10 minutos previos a la toma de la muestra de líquido oral. Si el donante tuvo algo en la boca durante los últimos 10 minutos, espere 10 minutos antes de comenzar la toma de la muestra.


La Toma de la Muestra

- Determine la fecha de caducidad del paquete del Intercept® Oral Fluid Collection Device y abra el paquete exterior que contiene el tomamuestras y el Oral Specimen Vial.
- Coloque el frasco para la muestra sobre una superficie plana donde el donante lo pueda ver. Pídale al donante que retire el tomamuestras de la envoltura.
- Pídale al donante que se coloque el tomamuestras entre la mejilla inferior y las encías y que se frote suavemente hacia delante y hacia atrás a lo largo de las encías hasta que el tomamuestras se humedezca. **Una vez humedecido, se debe dejar el tomamuestras entre la mejilla y las encías por 5 minutos.**
- Después de 5 minutos, pídale al donante que abra el frasco para la muestra en posición vertical, con la punta apuntando hacia abajo, para lo cual deberá mover la tapa suavemente hacia adelante y hacia atrás para evitar que se derrame el contenido.
- Pídale al donante que empuje el tomamuestras hasta el fondo del frasco.
- Pídale al donante que rompa la varilla en la línea marcada, contra la orilla del frasco. **Pídale al donante que no incline el frasco y que no derrame el líquido.**


Para Completar el Proceso

- Pídale al donante que le ponga la tapa muy bien al frasco.
- Pídale al donante que coloque la cinta de seguridad sobre la parte superior y los costados del frasco, anote la fecha y sus iniciales en la cinta.
- Coloque el frasco de Intercept® y cualquier formulario requerido de la cadena de custodia en la bolsa para muestras y selle la bolsa.
- Ponga la bolsa con la muestra en el paquete de envíos rápidos y envíe la muestra al laboratorio para análisis.

Esponjar

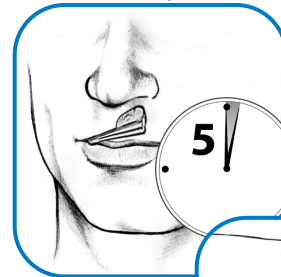

Rompe

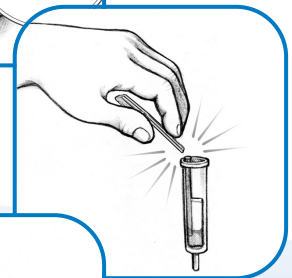

Sella



El Valor de una Marca Fiable y de Confianza



OraSure Technologies

OraSure Technologies, Inc. • 220 East First Street • Bethlehem, PA 18015 • Toll Free 800.ORASURE

Intercept® is a registered trademark of OraSure Technologies, Inc.

www.OraSure.com

INT0142 (rev. 09/10)